

Transtibial Soket Alçı Ölçü Alma

Prof. Dr Serap Alsancak

Doç.Dr.Senem Güner

Öğr. Gör.Enver Güven

Öğr. Gör. Ali Koray Özgün

Asist. Yunis Akkuş



Hasta gerekli
değerlendirmeden sonra
alçı ölçü için hazırlanır.




- Güdük üzerine giyilen stakinet veya naylon ince çorap üzerine kemik çıkıntılar işaretlenir





- Güdük üzerinde anterior – posterior ve medial-lateral kaliper ölçümü
- Güdük üzerinde 2 cm lik aralık ile mezura çevre ölçümleri ,
- Güdük uzunluğu kaydedilir.

Güdük üzerinde flepleme tekniđi ile 5 katlı alçı fleplerinin yerleřtirilmesi

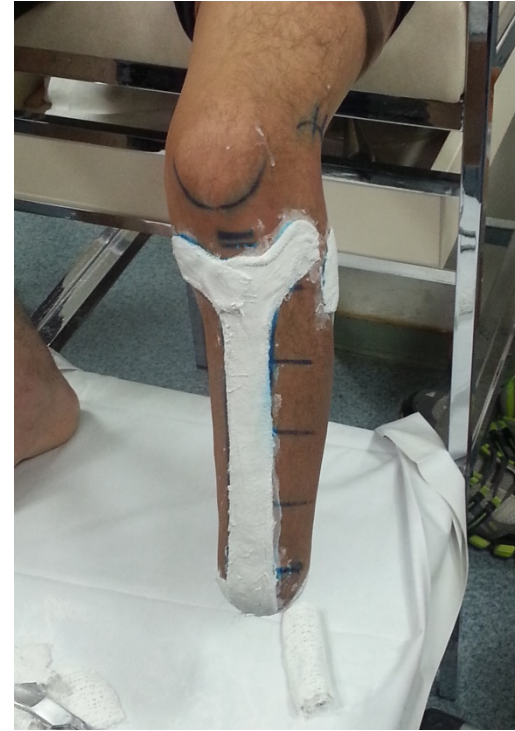

Distal kısma alçı sarılması ve patellar tendon basısı verilmesi





- Popliteal bölgeyi içine alan arka flep eklenmesi ve hamstring kas tendonları için yatak yapılması,



Kondillerin üzerine çıkan
ön flep eklenmesi ve
gerekli basıların flep
üzerinden verilmesi.



Negatif modelin oluřturulması